

SANITAS



SFT 77

F multifunkčný teplomer

Pokyny 2

Elektromagnetická kompatibilita Informácie

..... 19

CE 0197

Servisná horúca linka:

*F*Tel.: 0805 340 006

FRENCH



Prečítajte si tento návod na obsluhu, aby to pre neskoršie použitie, umiestnite ju k dispozícii ostatným používateľom, a postupujte podľa pokynov fi gurent tam.

obsah

používa 1. Symboly	2
2. Použitie v súlade s odporúčaniami	4
3. konštatuje	4
4. Opis zariadení	6
5. Popis displeja	6
6. Uvedenie do prevádzky	7
7. Základné nastavenie	7
8. Čo by ste mali vedieť pred meraním	8
9. Opatrenia	9
9.1 Meranie telesnej teploty na čele	10
9.2 Meranie telesnej teploty v uchu	10
Meranie teploty 9.3 Object	12
9.4 zobrazenie nameranej hodnoty	12
10. Výmena batérií	13
11. Čistenie / storage	13
12. Eliminácia	14
13. Čo ak chybové hlásenia	14
14. Technické údaje	15
15. Záruka / servis	16

obsah

Skontrolujte, či je lepenka vonkajší obal súpravy je neporušená a ak sú zahrnuté všetky prvky. Pred použitím sa uistite, že zariadenie a doplnky nevykazujú žiadne viditeľné poškodenie, a že všetky obaly boli odstránené. V prípade pochybností nepoužívajte a obráťte sa hovoriť na svojho predajcu alebo zákaznícky servis. 1 Multifunkčný 1.5V AAA LR03 1 predné tip / ochrana 1 ručný teplomer 2

1. Použité symboly

Nasledujúce symboly sú použité v tomto návode na obsluhu a na prístroji:



VAROVANIE

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu alebo ohrozenia zdravia.

	UPOZORNENIE Tento symbol varuje pred možným poškodením zariadenia alebo príslušenstva.
	poznámka Indikácia dôležitých informácií.
	Postupujte podľa pokynov v užívateľskej príručke
	Typ prístroja BF
	Likvidácia v súlade s európskou smernicou WEEE (Waste elektrických a elektronických zariadení) týkajúce sa elektronického odpadu.
	Viacúčelový teplomer je recyklovateľný, vyrobený Sou zodpovednosť rozšírená výrobcu a aktívny zber oddelene.
	Eliminovať balenie vo vzťahu k život- MENT

	Značka CE potvrdzuje súlad s požiadavkami základného smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach.
	výrobca
IP 22	Ochrana proti vniknutiu cudzích telies, priemer 12,5 mm alebo viac, proti vodným kvapkám v prípade, že kryt nie je naklonený viac než 15 °
Skladovanie / preprava 	Teplota a vlhkosť skladovania a transport oprávnené
prevádzkové 	Teplota a vlhkosť použitia ad-prenosnou
	poradové číslo

2. Použitie v súlade s odporúčaniami

Multifunkčný teplomer je len pre meranú rer ušné teploty, čelné a objektov. Môžete rýchlo a jednoducho poznať vaše telesná teplota alebo teploty objektu. Hodnoty sú uložené automaticky. Multifunkčný teplomer je vhodné opatrenia doma.

Používajte prístroj iba na účely, pre ktoré bol navrhnutý v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné! Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nie je v súlade utiliza-.

Prístroj je v súlade s požiadavkami európskej smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych výrobkoch, zákon o zdravotníckych výrobkoch, ASTM E 1965-98 a európskej normy EN 12470-5: teplomery lekárske - Časť 5: požiadavky na ušných infračervené teplomery (s maximálnou čistotou zariadení) a európskej normy EN 60601-1-2 a spĺňa osobitné bezpečnostné požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu sa. Upozorňujeme, že prenosné a mobilné VF komunikačné systémy môžu mať vplyv na to Mera viditeľné. Pre viac informácií, obráťte sa na zákaznícky servis na adrese alebo odkazujú na konci tohto návodu.

3. Poznámky

bezpečnostné opatrenia



VAROVANIE

- Pri meraní, opatrne zasuňte špičku senzora teplomera v uchu.
- V prípade niektorých akútnych infekčných ochorení, použitie teplomeru na viac osôb, môže byť nevhodné z dôvodu možného prenosu choroboplodných zárodkov aj napriek net toyage a nevyhnutnou dezinfekciu. Ak je to potrebné, poraďte sa s lekárom.
- Udržujte prístroj mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusení! Deti môžu prehltnúť obal alebo predné hrot / ochranu.
- Deti by nemali používať prístroj. Lekársky výrobok nie je hračka.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je šošovka je neporušený. Ak je poškodený, obráťte sa na predajcu alebo Ser vice trh s náhradnými dielmi.
- Prístroj bol navrhnutý pre praktické použitie, ale nenahrádza lekára návštevu.
- Nedotýkajte sa objektívu prstami.
- Po cvičení, po kúpele alebo ak ste boli vonku, počkajte asi 30 minút, kým užijete teploty na čele.



Pokyny o batériách

- Ak sa elektrolyt z bunky batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnutú oblasť vodou a poradiť sa s lekárom.



- **Riziko prehltnutia! Tieto deti by mohli batérie a sýtič. Udržujte batérie mimo dosahu malých detí!**

- Pozorovať ďalšie znamienka (+) a mínus (-).
- Ak je k úniku batérie, nasadiť ochranné rukavice a vyčistite priehradku na batérie suchou handričkou.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.



- **Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie sa musia nabíjať alebo skratovaný.
- V prípade dlhšieho nepoužívania prístroja, vyberte batérie z priehradky na batérie.
- Používajte len rovnaké alebo ekvivalentné batérie.
- Vždy vymeňte všetky batérie súčasne.
- Nepoužívajte dobíjacie batérie!
- Nerozoberajte, otvorené alebo zlomiť batérie.



Všeobecné odporúčania

- Opravy by mali byť vykonávané iba autorizovanými servisnými centrami. V opačnom prípade dôjde k strate záruky.

- Teplomer je citlivé elektronické zariadenie. Mani- I starostlivo a predloží ho mechanickým nárazom.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Teplomer nie je vodotesný. Z tohto dôvodu sa zabránilo priamemu kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Multifunkčný teplomer SFT 77 je určený pre body meranie popísaných v užívateľskej príručke.
- Po každom použití mäkkou handričkou namočenou v dezinfekčnom vyčistenie merací hrot.
- Pred každou sťažnosťou, najprv skontrolujte batérie a v prípade potreby ich zmeniť.
- Opravy by mali byť vykonávané iba autorizovanými servisnými centrami. V opačnom prípade dôjde k strate záruky.
- Pre ďalšie otázky, obráťte sa na svojho predajcu.

4. Zariadenie Popis

START / MEASURE (meranie teploty)
auri- lar alebo predmety)



Kryt priestoru pre batérie

5. Zobrazit' popisok

1 Zobrazenie dátumu / času

2 12h (AM / PM)

3 stav batérie

4 memú jednotku
Celsius / Fahrenheit

5 teplota objektu módne

6 hodnota teploty


7 pípnutie kľúč Symbol

8 Zobrazenie počtu zamestnateľnosti
zálohovanie investície

9 prebieha meranie

10 Režim teploty auri-
lar

11 Módny Predné Teplota

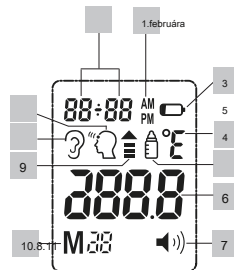

6. Uvedenie do prevádzky

Než budete môcť prístroj zapnúť, musíte najprv vložiť priložené batérie.

1. Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane jednotky. Robiť ser glis- priestoru pre batérie kryt v smere šípky.
2. Vložte dve AAA LR03 batérie do priestoru pre batérie. Uistite sa, vložte batérie s polaritou signalizovaný. Dodržiavať túto schému v compart- stavebných buniek.
3. Ak chcete zatvoriť priestor pre batériu, posuňte kryt nahor, kým nebudete počuť a cítiť zaklapne. Akonáhle sú vložené batérie, obrazovka sa automaticky zobrazí menu základných nastavení.

7. Základné nastavenie

Môžete vykonať nasledujúce základné nastavenia na multifunkčnom teplomere: Jednotka teploty (stupne Celzia / Fahrenheita), formát času (12 alebo 24 hodín), dátum a čas.

1. Ak chcete zapnúť, stlačte **ON** /

MERANIE



2. Stlačte 3 sekundy na kľúč **S**.



3. aktuálne nastavená teplota bliká na obrazovke. Zvoľte teplotu jednotky pomocou tlačidla **S** (° C alebo ° F). potvrdte stlačením **Mr**.

4. Formát časových bliká na obrazovke. Vybrať formát času (12 alebo 24) s kľúčom **S**. potvrdte stlačením **Mr**.



5. ročník bliká na obrazovke. Zvoľte rok pomocou tlačidla **S**. potvrdte stlačením **Mr**.



6. mesiac bliká na obrazovke. SE- lectionner mesiac pomocou tlačidla **S**. potvrdte stlačením **Mr**.



7. deň bliká na obrazovke. Sa- lectionner deň pomocou tlačidla **S**. potvrdte stlačením **Mr**. Ak je formát času nastavený na 12 hodín, mesiac a deň sú obrátené.



8. čas bliká na obrazovke. Vyberte čas pomocou tlačidla **S**. potvrdte stlačením **Mr**.



9. Na displeji minút blíkajú na obrazovke. Zvoľte minúty pomocou tlačidla **S**. potvrdíte stlačením **Mr**.



10. Zariadenie zaznamenáva základné nastavenie zapína a vypína automaticky.



Povolit' / zakázať tónovú

Môžete aktivovať alebo deaktivovať pípnutie tlačidla na prístroji. Ak je aktivovaná, ozve sa pípnutie pri stlačení tlačidla a po každom meraní.

Ak chcete aktivovať kľúč pípnutia, stlačte tlačidlo **S**

keď je fotoaparát zapnutý. Symbol "reproduktor" sa zobrazí na obrazovke



), Ak chcete zakázať pípnutie tlačidla, opätovným stlačením tlačidla **S**. Symbol "reproduktor" zmizne.

8. Čo by ste mali vedieť pred meraním

Existujú rôzne teplomery na meranie v rôznych telesných in- práv:

- Ear / teplomer na čelo (tento teplomer na meranie pri uchu alebo čelo)

- držať teplomer (pre rektálne (v konečníku), axiálne (podpažné) alebo orálne (v ústach))



poznámka

Meranie teploty poskytuje nameranú hodnotu označujúcu aktuálnu teplotu tela človeka. Ak si nie ste istí o interpretácii výsledkov alebo obte- nos abnormálne hodnoty, poraďte sa s lekárom. To platí aj v prípade miernych teplotných zmien, ak sa pridajú ďalšie príznaky ochorenia, napr. nepokoj, ťažké potenie, návaly horúčavy, zvýšená srdcová frekvencia, kolaps auto- dio- cievy, atď.

Teploty merané s rôznymi teplomermi nemožno porovnávať.

Tak povedz svojho lekára (alebo majte na pamäti, že v prípade, že AU, ktorá sa diagnóza) s tým, čo ste teplomer meria telesnú mierne vymazanie a kde v tele. Teplota zdravého človeka je ovplyvnená niekoľkými faktormi: vlastné individuálne metabolizmus každého človeka, vek (telesná teplota je vyššia v nour- Rissons a malých detí a znižovať s vek, u detí dochádza najvýznamnejšie zmeny teploty rýchlejšie a častejšie, napríklad pokiaľ ide o rast prúdov), oblečenie, vonkajšej teploty, dennej doby (ráno, telesná teplota a nízka

počas dňa a noci), vykonávať vopred Cedeño a v menšej miere, mozgovú aktivitu. Hodnota teploty sa mení v závislosti na polohe tela, kde sa meria. Zmena môže byť v rozmedzí od 0,2 ° C (0,4 ° F) 1 ° C (1,8 ° F) u zdravých ľudí. To znamená, že normálne rozmedzie je teplota:

- ku koncovému opatrenia medzi 35,8 ° C (96,4 ° F) a 37,6 ° C (99,7 ° F), s čela teplomerom,
- fibrilácia medzi merania: 36,0 ° C (96,8 ° F) a 37,8 ° C (100 ° F), s ušný teplomer,
- pre meranie rektálnej teploty medzi 36,3 ° C (97,3 ° F) a 37,8 ° C (100 ° F), s obyčajným teplomerom,
- pre meranie orálne teplotu medzi: 36,0 ° C (96,8 ° F) a 37,4 ° C (99,3 ° F) s normálne teplomerom.

Ak chcete sledovať priebeh teploty, meria vždy dní na rovnakom mieste tela. Odporúčame EF fectuer tri opatrenia. Ak tri výsledky meraní sú rôzne, za najvyššiu hodnotu.

9. opatrenia



poznámka

Pred každým použitím sa uistite, že objektív nie je poškodený Gee alebo znečistený. Ak áno, obráťte sa na predajcu alebo na zákaznícky servis. Ak je objektív znečistený, vyčistite, ako je popísané v kapitole "11. Čistenie / skladovanie."

Uvedomte si, že multifunkčný teplomer musí byť aspoň 30 minút v miestnosti, kde sa vykonáva bezpečné Me.

Pred každým meraním sa uistite, že ste nastavili režim, v ktorom chcete merať.

režim	ucho	predné	objekt	Beep aktivovaných tlačidiel
plátno				

9.1 Meranie telesnej teploty na prednej strane



poznámka

Všimnite si, že čelo alebo chrám musí byť bez potu a make-up, a že v prípade čelného merania, rozhodnutie vazokonstrikčné lieky a podráždenie pokožky môže skresliť výsledok merania.


1. Ak chcete multifunkčný teplomer, stlačte tlačidlo Počet SE- **ON / MERANIE**



2. Umiestnite meracie hlava s predným viečkom / ochrany na chrámu.

3. Podržte **zmerať**

a ísť dole multifunkčný teplomer pravidelne na čele druhej chrámu. Pri meraní, šíp AF karta na obrazovke.

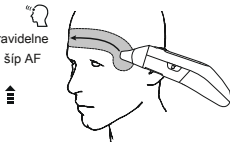

4. Uvoľníte tlačidlo **zmerať**

 Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji a koniec merania je oznámené krátkym pípnutím (ak je zapnuté tóny tlačidiel).



5. V prípade, že nameraná hodnota je v normálnom rozmedzí (<38 ° C / 100,4 ° F), zelená LED al LUME na 3 sekundy. Ak je nameraná hodnota vyššia (≥ 38 ° C / 100,4 ° C, horúčka), červená LED svieti.



6. Prístroj sa automaticky vypne po 60 sekundách alebo stlačením tlačidla potom **ON / MERANIE**  na 3 sekundy to vypnúť.

7. Vyčistite prístroj po každom použití, ako je popísané v "čistení / skladovanie."

9.2 Meranie telesnej teploty v uchu




VAROVANIE

- Niektorí ľudia majú rôzne hodnoty v ľavej i prave ucho. Posúdiť zmeny teploty, vždy merať v rovnakom uchu za rovnakú osobu.
- Deti by mali používať integrovaný ušný teplomer pod dohľadom dospelých osoby. Všeobecne platí, že je možné vykonávať meranie od veku 6 mesiacov. U malých detí do 6 mesiacov, zvukovod je stále úzka. takto,

teplota často nemôžu byť vyhodnotená a môžu byť zobrazené tiež nízke výsledky merania.

- Meranie by sa nemalo vykonávať v postihnutom ušné zápalových ochorení (napr. Pyorrhea, sekréty), po vylúčení možných úrazov ucha (napr. The poškodenia ušného bubienka), alebo v priebehu hojenia fáze po zásahu chirurgicky nadol. Vo všetkých týchto prípadoch sa poraďte s lekárom.
- V prípade niektorých akútnych infekčných ochorení, votné multifunkčného teplomeru na niekoľko osôb, môže byť nevhodné z dôvodu možného prenosu choroboplodných zárodkov napriek čistenie a dezinfekciu nutné. Ak je to potrebné, poraďte sa s lekárom.
- Ak máte zostať ležať na jedno ucho na nejaký čas prolon- gén, teplota mierne zvyšuje. Počkať, alebo opatrenie v druhom uchu.
- Ušný maz môže mať vplyv na meranie, takže prosím čistiť ucho pred meraním v prípade potreby.

1. Ak chcete multifunkčný teplomer, stlačte tlačidlo Počet SE- ON / MERANIE

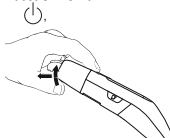

2. Odstráňte predný hrot / ochranu až mierne doprava (1) a potom ťahom dopredu (2).

3. Uistite sa, že špička senzora a kanál ucho čisté. Vzhľadom k tomu, potrubia au ditif je mierne zakrivená, treba ľahko vytiahnuť ucha hore a späť pred in- Duce špičku senzora, aby bolo možné smerovať priamo na ušný bubienok.



Polohovanie u malých detí

U malých detí do jedného roka:

- Položte dieťa na jednej strane tak, aby jej ucho smeruje nahor.
- Pred vložení hrotu senzora s opatnosťou do ucha opatrne vytiahnite ucho dozadu. U malých detí starších ako jeden rok:



- Položte sa mierne za dieťa.
- Pred vložení hrotu senzora opatrne do ucha opatrne vytiahnite ucho smerom nahor a dozadu.



4. Vložte hrot snímača a jeden druhý stlačením tlačidla **ON / MERANIE**



Na obrazovke sa zobrazí.



Pri meraní, šíp

5. Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji a koniec merania je oznámené krátkym pípnutím (ak je zapnuté tóny tlačidiel).



6. Ak je nameraná hodnota v normálnom mužskom rozsahu ($<38^{\circ}\text{C}$ / $100,4^{\circ}\text{F}$), zelená LED svieti. ak nameraná hodnota je väčšia ($\geq 38^{\circ}\text{C}$ / $100,4^{\circ}\text{C}$, horúčka), červená LED svieti.



7. Prístroj sa automaticky vypne po 60 sekundách alebo stlačením tlačidla potom **ON / MERANIE** na 3 sekundy to vypnúť ..



na 3 sekundy

8. Vyčistite prístroj po každom použití, ako je popísané v "čistení / skladovanie."

9.3 Teplotný meraných objektov

1. Ak chcete multifunkčný teplomer, stlačte tlačidlo Počet SE- **ON / MERANIE**



2. Súčasne 3 sekundy kľúče **M** a **S** pre

prechádzajú režim objekt teploty. Na displeji sa zobrazí



3. Stlačte **ON / MERANIE** a bod špičky

senzor stlačením 3 cm vzdialenej kľúč k objektu, alebo kvapaliny, ktorá sa má merať (nie ponor au Cun prípad v kvapaline). Keď Me, či sa na obrazovke zobrazí šípka.



4. Uvoľnite tlačidlo **ON / Me**

SURE  Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji a koniec merania je oznámené krátkym pípnutím (ak je zapnuté tóny tlačidiel).



5. Pre ukončenie teploty režimu objektov, súčasne drží kľúče **M** a **S** stlačené po dobu 3 sekúnd.

6. Prístroj sa automaticky vypne po 60 sekundách alebo stlačením tlačidla potom **ON / MERANIE**  pre 3 sekúnd vypnúť.

7. Všimnite si, že zobrazená teplota je stanovená a nie sú korigované povrchová teplota. To nie je porovnateľné s teplotou plocha / ucho.

9.4 zobrazenie nameraných hodnôt

Prístroj sa automaticky zaznamenáva hodnoty za posledných 30 meraní. Ak dôjde k prekročeniu 30 umiestnenia záloh, najstaršia hodnota sa vymaže.

Zaznamenané hodnoty sú prístupné takto:

1. Ak chcete multifunkčný teplomer, stlačte tlačidlo Počet SE- **ON / MERANIE**



2. Press **Mr.** Posledné merania sa zobrazí na displeji.

3. Pre prepínanie medzi meraním zaznamenané na inú, stlačte **Mr.**

4. Prístroj sa automaticky vypne po 60 sekundách alebo stlačením tlačidla potom **ON / MERANIE**



sekúnd vypnúť.

10. Výmena batérií

Pred výmenou batérií sa uistite, že je fotoaparát vypnutý. Keď sa batérie vybijú, na obrazovke sa objaví varovný symbol batérie. Meranie teploty je stále možné.  batérie by mali byť vymenené, len čo to bude možné. Keď sa varovný symbol batérie



gnotent na obrazovke, batérie je potrebné zmeniť okamžite. Keď sú batérie príliš nízka, teplomer sa automaticky vypne.




Ak chcete vymeniť batériu, postupujte nasledovne:


1. Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane jednotky. Robiť ser glis- priestoru pre batérie kryt v smere šípky.
2. Vložte dve AAA LR03 batérie do priestoru pre batérie. Uistite sa, vložte batérie s polaritou signalizovaný. Dodržiavať túto schému v compart- stavebných buniek.
3. Ak chcete zatvoriť priestor pre batériu, posuňte kryt nahor, kým nebudete počuť a cítiť zaklapne. Akonáhle sú vložené batérie, obrazovka sa automaticky zobrazí menu základných nastavení.

11. Čistenie / storage

- Vyčistite špičku snímača a predné špičky / ochranu po použití. Pre tento účel použiť mäkkú handričku alebo vatový tampón môže byť navlhčený dezinfekčný prostriedok, alkohol alebo horúcou vodou.

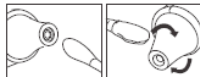

- Na čistenie celého zariadenia, použite jemnú handričku so saponátom.

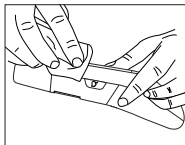

- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Vždy uložiť teplomer s predným hrotu / ochrany umiestnené na to.
- Ak plánujete dlhšie skladovanie, vyberte z neho batérie.
- Zariadenie by nemalo byť skladované alebo používané pri vysokých teplotách alebo príliš vysokej vlhkosti vzduchu alebo s nízkym (viď technické údaje), slnečnému žiareniu, pripojených k elektrického prúdu alebo v prašnom prostredí. V opačnom prípade by to mohlo viesť k nepresnosti merania.

12. Eliminácia

Použitá a úplne vybité batérie sa musia likvidovať v špeciálnych kontajneroch alebo v aktívnych zberných miestach vyhradených na tento účel, alebo podať predajca elektrických spotrebičov. Likvidácia batérií je zákonná povinnosť pre vás.

Tieto symboly sú škodlivé látky v batériách: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batérie obsahujúce ortuť.




V záujme ochrany životného prostredia, prístroj nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom na konci svojej životnosti. Likvidácia musí byť vykonaná prostredníctvom vhodných zberných miestach vo vašej krajine. Eliminovať také AP- súlade s európskou smernicou - WEEE (Waste elektrických a elektronických zariadení) Čo sa týka použitých elektrických a elektronických zariadení. Ak máte otázky, kontaktujte miestne úrady zodpovedné za likvidáciu a recykláciu týchto produktov.



13. Čo keď chybové hlásenia

Správa ERR eur	príčina	riešenie
	Teplota affich- ed je väčšia ako 1) Spôsob fibrilácia / čelo teplomer: 43 ° C (109,4 ° F). 2) teplota objektu Režim: 100 ° C (212 ° F)	Pomocou teplomer iba v teplotných rozmedziach signalizovaný. Ak je to potrebné, vyčistite hrot senzora. V prípade opakovaných chýb displejoch nájdete u svojho predajcu alebo zákazníka ser- vice.
	Je teplota nižšia ako prilepené AF 1) Spôsob fibrilácia / čelo teplomer: 34 ° C (93,2 ° F). 2) Spôsob tep- ture položiek: 0 ° C (32 ° F).	

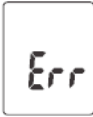Správa ERR eur	príčina	riešenie
	Teplota votné nie je v rozmedzí od 15 ° C do 40 ° C (59 ° F až 104 ° F).	Používať multifunkčný teplomer iba v tep- ture uvedené rozsahy.

Ak je váš problém tu nie je uvedený, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

14. Technické údaje

Názov a model	SFT 77
rozsah merania	Režim fibrilácia / čelo teplomer: 34 ° C až 43 ° C (93,2 ° F až 109,4 ° F) Prevádzková teplota kusov: 0 ° C až 100 ° C (32 ° F až 212 ° F)

Presnosť merania v laboratóriu	Režim fibrilácia / čelo teplomer: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$), 35°C až 42°C (95°F až $-107,6^{\circ}\text{F}$), mimo tohto rozsahu merania $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) teplotného režimu objektu: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) až $<30^{\circ}\text{C}$ (86°F); $\pm 5\% \geq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F)
Pauza medzi dvoma opatreniami	Aspoň 5 sekúnd
Reprodukovateľnosť v klinickej praxi	Ušné: Deti 1-5 rokov: $\pm 0,08^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,14^{\circ}\text{F}$) Dospelí: $\pm 0,08^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,14^{\circ}\text{F}$) predná: Deti, 1-5 rokov: $\pm 0,09^{\circ}\text{C}$, ($\pm 0,16^{\circ}\text{F}$) Dospelí: $\pm 0,09^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,16^{\circ}\text{F}$)
jednotky merania	$^{\circ}\text{C}$ alebo Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)
Podmienky UTI lizácie	15°C až 40°C (59°F až 104°F) s relatívnou vlhkosťou až 85% (bez kondenzácie)
Skladovanie a transport	-25°C až 55°C (-13°F až 131°F) a relatívna vlhkosť do 85% (bez kondenzácie)
rozmery	cca. 133 x 40,2 x 38,4 mm

závažia	67 g (bez batérie)
batérie	2 1,5 AAA (LR03)
pamäť	30 opatrenia

Sériové číslo sa nachádza na prístroji alebo v klamstvo priestoru pre batérie.

15. Záruka / servis

Článok L217-16 spotrebiteľského kódexu Ak kupujúci požiadala predajcu, v priebehu obchodného RANT garantuje ktorá jej bola poskytnutá pri akvizícii alebo opravy osobného majetku, rehabilitačné nevztahuje záruka, každá doba zadržania aspoň siedmich dní, ktorá znie na dobu trvania záruky, ktorá ešte zostáva. Táto lehota beží od požiadavky kupujúceho intervenovať alebo rezervy na opravy príslušného tovaru, ak je toto ustanovenie je po požiadavke intervenčnej.

Bez ohľadu na to upísaného obchodné záruky, že predávajúci aj naďalej zodpovednosť za vady zhody rédhibi- toryovci a vád v súlade s článkami L217-4 až L217-13 spotrebiteľského zákonníka a sekciou 1641 až 1648 a 2232 z občianskeho zákonníka.

Článok L217-4 spotrebiteľského zákonníka

Predávajúci je povinný dodať tovar v súlade so zmluvou, a zodpovednosť za vady zhody existujúcich pri dodaní. Zaoberá sa tiež rozpor vyplývajúci z PACK-starnutia, pokyny pre montáž alebo inštaláciu, kedy bol daný k nemu zo zmluvy, alebo bola vykonaná na jeho zodpovednosť.

Článok L217-5 spotrebiteľského kódexu Na splnenie zmluvy, výrobok musí:

1. byť vhodné na tento účel zvyčajne podobné nehnuteľnosti a prípadne:

- zodpovedať opisu daný predajca a má vlastnosti, ktoré mu predložil kupujúcemu ako vzorku alebo modelu;
- Funkcie, ktoré kupujúci mohol odôvodnene očakávať vzhľadom na verejný výrok predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, a to najmä v publicite alebo označení;

2. Alebo funkcie určia vzájomnou dohodou stranami alebo môže byť vhodný na konkrétny účel, pre ktorý robil kupujúci je známe, že medzi predávajúcim a druhý prijatý.

Článok L217-12 spotrebiteľského zákonníka

Akcie vyplývajúce z nedostatku zaniká zhody do dvoch rokov od dodania tovaru.

Článok 1641 občianskeho zákonníka

Predávajúci musí zaistiť, pokiaľ ide o skryté vady predanej veci, ktoré ho robia nespôsobilým na použitie, pre ktoré bol určený, alebo že pokles tohto použitia, že kupujúci by nemal kúpiť, alebo nie zaplatili za nižšiu cenu, keby vedel.

Článok 1648, odsek 1 Občianskeho zákonníka

Opatrenie, ktoré vedie zo skryté chyby, musí byť uvedená do kové quéreur do dvoch rokov od zistenia chyby.

Ponúkame 3-ročnú záruku od dátumu nákupu v prípade chyby materiálu a výrobe produktu. Záruka sa nevzťahuje:

- v prípade poškodenia v dôsledku nevhodného použitia;
- opotrebované diely za použitia;
- na škody spôsobené zo strany klienta;
- od okamihu, keď neoprávnená osoba otvorí Mera zrejme.

Právne záruky zákazníka nie je ovplyvnená obchodné zárukou. Aby bolo možné uplatniť nároky zo záruky v období, zákazník musí predložiť doklad o kúpe. Zákazník môže uplatniť záruku po dobu 3 rokov od dátumu nákupu u Hansa Dinslage GmbH, Uttenweiler, Nemecko.

V prípade reklamácie, obráťte sa na náš zákaznícky servis:

Telefonická podpora (zadarmo):

E-mail:

FTel .: 0805 340 006

service-f@sanitas-online.de

Pozývame vás k návratu chybný výrobok na adresu:

NU Service GmbH
Lessingstrasse 10b
89231 Neu-Ulm
Nemecko

Elektromagnetická kompatibilita Informácie

tabuľka 1

Usmernenie a vyhlásenie, elektromagnetické žiarenie výrobca

SFT77 Multifunkčný Teplomer je určený na použitie v nižšie uvedenom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ Multi-funkcie teplomer SFT77 shoulds zaist'uje, že je používaný v takomto prostredí.

test emisií	dodržiavanie	Elektromagnetické prostredie - návod
RF emisie CISPR 11	skupina 1	SFT77 Multifunkčný teplomer využíva vysokofrekvenčnú energiu len pre interné ICT funkcie. Preto ict emisie RF veľmi nízke a nie sú spôsobené Pravdepodobný Akýkoľvek zásah do blízkych elektronických zariadení.
RF emisie CISPR 11	trieda B	SFT77 Multifunkčný teplomer je vhodný pre použitie vo všetkých establis- hments Ten druhý domáciach a priamo pripojených do verejnej siete rozvodu elektrickej energie nízkeho napätia, ktorá napája budovy určenej na plutvách domestik.
Harmonické emisie IEC 61000-3-2	nepoužiteľné	
Napätie emisie výkyvy / blikanie IEC 61000-3-3	nepoužiteľné	

Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita

SFT77 Multifunkčný Teplomer je určený na použitie v nižšie uvedenom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ Multi-funkcie teplomer SFT77 shoulds zaistiť, že je používaný v takomto prostredí.

skúška odolnosti	IEC 60601 testovacie hladina	Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - návod	
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV vzduch	± 6 kV kontakt ± 8 kV vzduch	Podlahové shoulds byť drevená, betónová alebo z keramických dlaždíc. Ak je podlaha pokrytá shythetic materiálom, relatívna vlhkosť shoulds byť aspoň 30%.
Rýchle elektrické prechodné javy / skupiny impulzov IEC 61000-4-4	± 2 kV pre napájacie vedenie elektrárne ± 1 kV vzduchu pre vstup / ulice dať linky	nepoužiteľné	Kvalita napájacej siete shoulds stať, že typické komerčné alebo nemocničnom prostredí.
príval IEC 61000-4-5	± 1 kV diferenčný režim ± 2 kV bežný móde	nepoužiteľné	Kvalita napájacej siete shoulds stať, že typické komerčné alebo nemocničnom prostredí.
Poklesy napätia, krátke prerušenia a kolísanie napätia na vstupných napájacích vedeniach IEC 61000-4-11	<5% U _T 95% pokles v U _T 0,5 cyklus 40% U _T (60% pokles v U _T pre 5 cyklov 70% U _T (30% pokles v U _T 25 cyklov 5% U _T 95% pokles v U _T po dobu 5 sekúnd	nepoužiteľné	Kvalita napájacej siete shoulds stať, že typické komerčné alebo nemocničnom prostredí. Ak vyžaduje aj naďalej použitie Multi-funkcie teplomer SFT77 op- potravínovej ruky pri výpadku prúdu, je to je doporučované que la SFT77 Multifunkčný teplomer byť napájaný z neprerušiteľného napájania alebo z batérie.
Sieťová frekvencia (50/60 Hz) magnetické pole IEC 61000-4-8 3 A / m		3 A / m	Power frekvenčný magnetické polia shoulds byť na úrovniach charakteristických pre typické miesto v typickom obchodne ciálne alebo nemocničnom prostredí.

POZNÁMKA: U_T Je striedavé napätie ruky pred aplikáciou skúšobnej úrovne.

tabuľka 3

Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita			
SFT77 Multifunkčný Teplomer je určený na použitie v nižšie uvedenom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ Multi-funkcie teplomer SFT77 shoulds zaistiť, že je používaný v takomto prostredí.			
skúška odolnosti	IEC 60601 testovacie hladina	úroveň zhody	Elektromagnetické prostredie - návod
Vykonalí RF IEC 61000-4-6 Vyžarované RF IEC 61000-4-3	3Vrms 150 kHz až 80 MHz 3 V / m až 80 MHz 2.5 GHz	3Vrms 3 V / m	Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia shoulds používať bližšie k podiel z SFT77 Multifunkčný teplomer, vrátane káblov, než odstup znovu začať a vypočíta z rovnice platnej pre frekvenciu vysielateľa. Odporúčaná separačná vzdialenosť: $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \text{ 80 MHz až 800 MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz až 2,5 GHz kde } P \text{ je maximálny výstupný výkon vysielateľa vo wattoch (W) selon výrobcu vysielateľa } d \text{ je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m).}$ Intenzita poľa z pevných RF vysielateľov, určené elektromagnetickým Site sur- Vey, má shoulds byť menšia než stupeň zhody v každom frekvenčnom rozsahu. b Interferencie môžu nastať v blízkosti zariadení označených symbolom Nasleduje:



POZNÁMKA 1 Pri 80 MHz a 800 MHz, frekvencia vyššia hodnoty platí.

POZNÁMKA 2 Tieto smernice nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vln je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí.

Intenzity polí z pevných vysielateľov, napríklad základňových staníc z rádia (mobilné / bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádio, AM a FM rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, nemožno predvídať teoretické hovor s presnosťou. TB pre posudzovanie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných rádiových vysielateľov, elektromagnetický prieskum shoulds považovať. Používa Ak sa nameraná intenzita poľa v mieste, v qui SFT77 Multifunkčný teplomera prekročí príslušnú hranicu RF compliance je SFT77 Multifunkčný teplomer shoulds potrebné dodržiavať na účely overenia normálnu prevádzku. V prípade abnormálneho výkonu, dodatočné opatrenia, môže byť potrebné, ako je zmena orientácie alebo premiestnenie SFT77 Multifunkčný teplomer. V priebehu rady frekvenciou 150kHz až 80MHz, Intenzita poľa shoulds byť nižšia ako [V1] V / m.

tabuľka 4

Odporúčaná separačná vzdialenosť entre notebook a mobilné rádiový frekvenčné komunikačné zariadenia a zariadenia alebo systému, na zariadenia a systémy, ktoré nie sú-resuscitačných

Odporúčaná separačná vzdialenosť entre notebook a mobilné rádiový frekvenčné komunikačné zariadenia a SFT77 Multifunkčné teplomer

SFT77 Multifunkčný Teplomer je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, vo qui vyžarované RF vzdialenosti Riadenie viedol. Zákazník alebo užívateľ SFT77 Multi-funkcie teplomera môže pomôcť zabrániť prevencia elektromagnetickému rušeniu dodržiavaním minimálnej vzdialenosti entre notebook a mobilné RF komunikačné zariadenia (vysielačmi) a Multi-Function teplomer SFT77 ako sa odporúča nižšie selon maximálnom výkone z komunikačného zariadenia.

Menovitý maximálny výstupný výkon vysielateľa (W)	Separačná vzdialenosť selon frekvencie vysielateľa (M)		
	150 kHz až 80 MHz	80 MHz až 800 MHz	800 MHz až 2,5 GHz
	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0.12	0.12	0.23
0,1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

U vysielateľov s menovitým maximálnym výkonom nie sú uvedené vyššie, odporúčaná separačné vzdialený v metroch (m) môže byť esti- križil sa pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielateľa, kde P je maximálny výstupný výkon vysielateľa vo wattoch (W) selon výrobcu vysielateľa.

POZNÁMKA 1 8 MHz a 800 MHz, oddeľovaciu vzdialenosť pre vyšší frekvenčný radov platí.

POZNÁMKA 2 Tieto smernice nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vln je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí.

Rozdelené: Hans Dinslage GmbH Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler, Nemecko
www.sanitas-online.de



Wellkang Ltd. 29 Harley
St W1G 9QR LONDÝN,
UK AVITA Corporation



9F, No. 78, Sec.1, Kwang-Fu Rd., San
Chung obvod 24158 New Taipei City
Taiwan

